


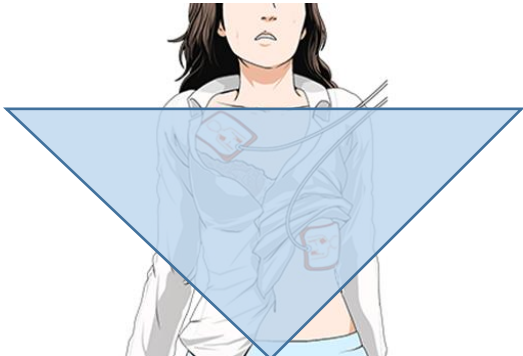
# 三角巾を利用したプライバシー保護方法

■AEDを使用した心肺蘇生法を実施する際には、次の手順の中でプライバシー保護に努めてください。

<p>① 胸骨圧迫を優先して行う ※服の上から実施</p>	<p>② AED 内に三角巾1枚が 入っています。</p>	<p>③ 三角巾を使用して プライバシー保護する。</p>
		
<p>④ パッドを装着する。 (右鎖骨の下部分)</p>	<p>⑤ パッドを装着する。 (左側胸部付近)</p>	<p>⑥ AED メッセージに従い 電気ショックを実施する。</p>
		

出典：越谷市消防局

## 【注 意 点】

<p>注意① 服を脱がさず AED パッドを装着 ※プライバシー保護より AED を優先</p>	<p>注意② 三角巾をかけプライバシーを保護する ※透ける場合などは三角巾を使用</p>
	


イラストの出典：キャノンマーケティングジャパン株式会社 HP(一部改変)

# 女性にAEDを使うのを ためらわないで!!

服をすべて脱がさなくても、AEDは使用できます!


パッドを

素肌に直接貼り付ける  
ことができているれば、**下着を  
外す必要はありません。**  
服の下で下着をずらして、  
**右の鎖骨の下と  
左わき腹のあたりに**  
貼ることで対応できます。

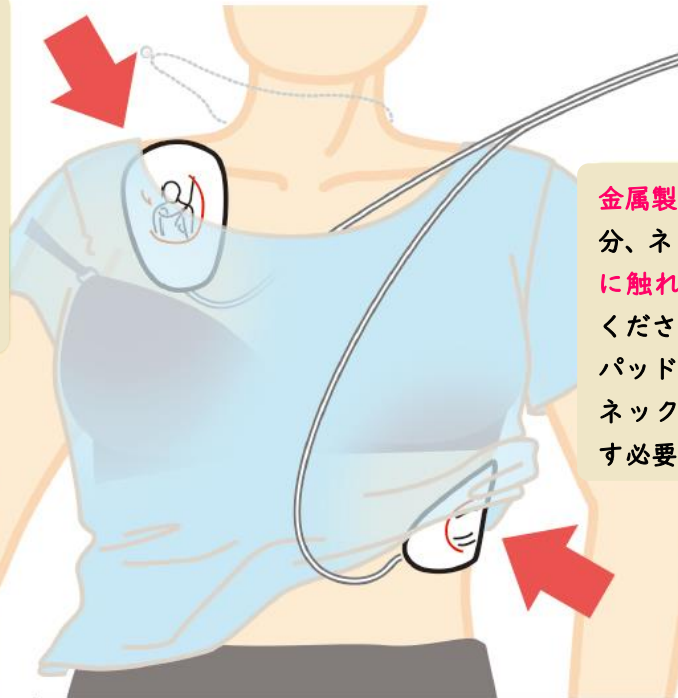

**金属製品**(下着のワイヤー部分、ネックレス等)は**パッドに  
触れさせないように**して  
ください。  
パッドに触れていなければ、  
ネックレスは無理に取り外  
す必要はありません。

AEDのパッドに描かれている  
イラストをご参照ください。

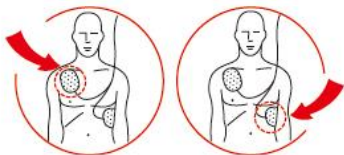

パッドを貼った後に、上から上着やタオルなどをかけても大丈夫です

## その他の注意事項

- \* 汗などで胸が濡れている場合は、水分を拭き取ってください。
- \* 電極パッドを貼る部分に貼り薬(湿布等)が貼られている場合は、貼り薬を剥がしてください。
- \* ペースメーカー等が植え込まれている場合(胸に硬いこぶのようなでっぱりが見える)は、このでっぱりを避けて電極パッドを貼ってください。
- \* 車内など、揺れている場所では使用しないでください。

**重要なことは  
電気ショックの時間を  
遅らせないことです**

電気ショックが1分遅れるごとに  
救命率は10%ずつ低下します

完璧でなくても構わないので、命を助けるために、  
勇気を持って一步を踏み出してください